

PARAM® CZY-6S Testador de Adesivo Durável

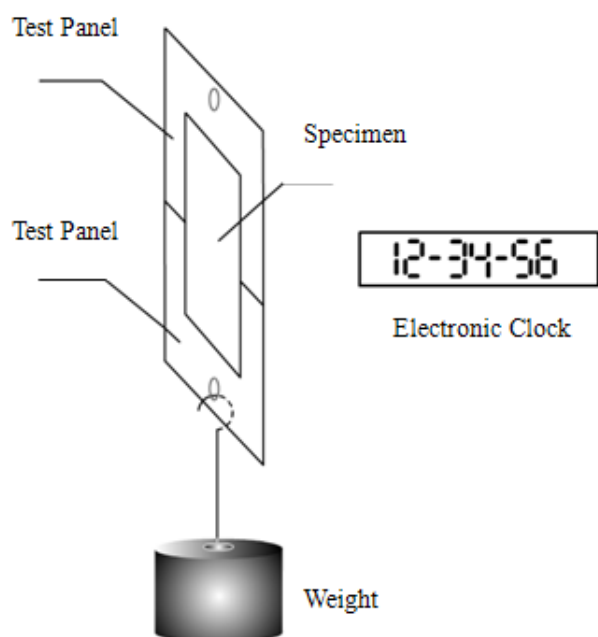
PARAM CZY-6S testador de adesivo durável é aplicável em teste de adesivo durável para fita adesiva de pressão sensível, bandagem adesiva(gesso), etiqueta adesiva e filme protetor, etc.

Características

Controlado por micro-computador, exibição LCD;
Teclado em filme; painel de operação em PVC;
Cronômetro e fechamento automático;
Desenho seis-estações de trabalho.

Princípio

Pendura-se os painéis cobertos por fitas adesivas na plateleira de teste vertical, pendura peso (s) na extremidade inferior do painel, o peso é especificado. Após um determinado período, testa deslocamento da amostra ou tempo até que a amostra desprender de painel completamente para demonstrar a capacidade de aderência de amostra.

**Dados técnicos**

Roldana padrão: 2,000g $\pm$ 50g
Peso: 1000 $\pm$ 10g (inclusive o painel de carga)
Painel de teste: 60 mm (L) x 40 mm (B) x 1.5 mm (D)
Âmbito de tempo: 0~100h (padrão)
0-10000h (Opcional)
Quantidade de estação de trabalho: 6
Dimensões: 600 mm (L) x 240 mm (B) x 400 mm (H)
Energia: AC 220V 50Hz
Peso líquido: 20kg

Normas

ASTM D3654, GB 4851, JIS Z0237